

VWR - DeLabo



Tisztatéri bútorok



Asztalok

- normál, kötött lábú, telepített és görgős
- polcos, fiókos, számítógéphez
- mosogató asztal

Polcok

- nyitott, zárt, ülő

Szekrények

- zárt, nyitott rekeszes
- fiókos, telepített és görgős

Állványok

- tálcás, rekeszes, kosaras, univerzális
- telepített, görgős

Fali konzol

- billentyűzet tartóval

Átülőpad




- telepített

Fogasok

- telepített, görgős

Vállfatartók

- telepített, görgős, fali

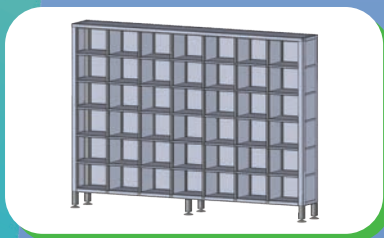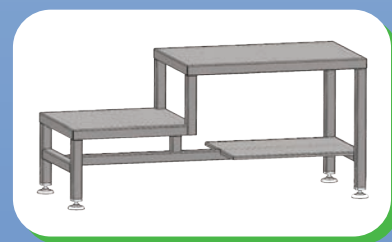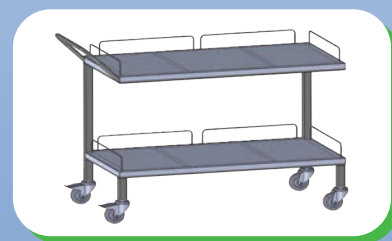

Bevezetés



Általános felhasználás

A tisztatéri bútorok - nevüknek megfelelően tisztatermekben - a laboratóriumi munkálatokhoz szükséges eszközök, készülékek, különböző alap- és segédanyagok, fogyóanyagok, minták elhelyezésére, tárolására, mozgatására, és egyéb kisegítő célokra használatosak.

Ezekon felül alkalmasak munkaruhák elhelyezésére, üvegeszközök tisztítására, szárítására, pihenési segédeszköz formában történő alkalmazásra, szállítóeszközöknek, telepített és mobil tárolóknak, polcoknak, asztaloknak, rekeszeknek, tisztítószernek, számítógép elhelyezésére és kezelésére, tárolóknak, állítható és fix fali felfüggesztésű polcoknak, cserélhető elemekkel ellátott univerzális állványoknak és további egyéb felhasználásokra.

Telepített és görgős bútorok

A telepített kialakítású bútorok esetében a lábak magasság állítási lehetőséggel rendelkeznek, amelyek segítségével a bútort billegésmentesen vízszintbe lehet állítani.

A görgős bútorok gumikerekei kiváló minőségű anti-sztatikus gumiból készülnek. A görgők forgó és fékeezhető kivitelűek, melyek lehetővé teszik a pozicionálást és a megbízható rögzítést.

Fertőtlenítés

A felület fertőtlenítésére legalább 70 %(V/V)-os etanol, vagy izopropil-alkohol (2-propanol) használható. A felvitel permetként, illetve törlőkendővel oldható meg.

Szerkezeti kialakítás

A kivitelezés formája alapvetően hegesztett rozsdamentes acélszerkezet. A hegesztési eljárás argon védőgázos AWI hegesztés, és/vagy ponthegeztés, mely megbízható kötést biztosít. A bútorok tartóelemei jellemzően zártszelvényből, zárt kialakítással készülnek, melyek miatt laboereszközöknek higiéniai szempontból is megfelelnek. A sarkok tömörek, hegesztettek.

A hegesztett szerkezet jellemzője, hogy a felület kikészítése elektropolírozással történik. Ennek köszönhetően a felület sima, homogén, valamint esztétikus megjelenésű lesz.

Az illesztések is pontosak, esztétikusak. A fém polcokhoz felhasználásra kerülő lemez polírozott felületű. A megfelelő felületi simaságot, minőséget a húzott zártszelvény és a fényes hengerelt lemez alapanyag, valamint az elektropolírozás együttesen biztosítja.

A hegesztett szerkezet néhány asztal és polc esetében kiegészül Trespa TopLab márkanévű, vegyszerálló, 16 mm vastag fenolgyanta műanyag lappal.

Tisztatéri megfelelés

GMP A/B, ISO 5. osztály


Egyedi igények teljesítése

A katalógusban közölt bútorokon kívül vállaljuk a felhasználó egyedi elképzeléseinek, valamint speciális igényeinek - legyen szó akár különleges kialakításról és a megszokottól eltérő méretekről - a megvalósítását is.

Asztalok

Telepített és görgős asztalok

Kódszám		Méretetek, mm
Telepített asztal	Görgős asztal	L x W x H
TTA600400300	TTAG600400300	600x400x300
TTA750400300	TTAG750400300	750x400x300
TTA900400300	TTAG900400300	900x400x300
TTA1050400300	TTAG1050400300	1050x400x300
TTA1200400300	TTAG1200400300	1200x400x300
TTA1350400300	TTAG1350400300	1350x400x300
TTA1500400300	TTAG1500400300	1500x400x300
TTA600550300	TTAG600550300	600x550x300
TTA750550300	TTAG750550300	750x550x300
TTA900550300	TTAG900550300	900x550x300
TTA1050550300	TTAG1050550300	1050x550x300
TTA1200550300	TTAG1200550300	1200x550x300
TTA1350550300	TTAG1350550300	1350x550x300
TTA1500550300	TTAG1500550300	1500x550x300
TTA600400450	TTAG600400450	600x400x450
TTA750400450	TTAG750400450	750x400x450
TTA900400450	TTAG900400450	900x400x450
TTA1050400450	TTAG1050400450	1050x400x450
TTA1200400450	TTAG1200400450	1200x400x450
TTA1350400450	TTAG1350400450	1350x400x450
TTA1500400450	TTAG1500400450	1500x400x450
TTA600550450	TTAG600550450	600x550x450
TTA750550450	TTAG750550450	750x550x450
TTA900550450	TTAG900550450	900x550x450
TTA1050550450	TTAG1050550450	1050x550x450
TTA1200550450	TTAG1200550450	1200x550x450
TTA1350550450	TTAG1350550450	1350x550x450
TTA1500550450	TTAG1500550450	1500x550x450

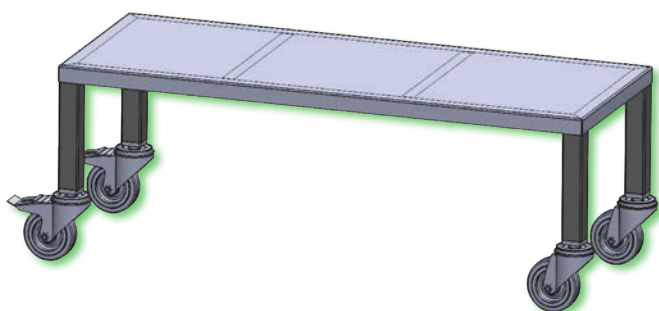

Görgős asztal

Telepített asztalok

Funkciók


- Nagyobb méretű, nehezebb készülékek, eszközök, anyagok elhelyezése

Előnyök

- Könnyen tisztántartható, résmentes kivitel
- Strapabíró, merev szerkezet
- Az 1050 mm-nél hosszabb asztalok 6 lábbal készülnek

További lehetőségek

- Az asztalt fellépőként is lehet alkalmazni
- A teherbírás az asztal "L" szélességétől függően 100 kg-tól 200 kg-ig terjed

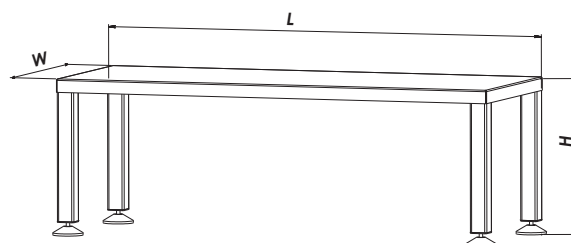

Görgős asztalok

Funkciók


- Nagyobb méretű, nehezebb készülékek, eszközök, anyagok elhelyezése és könnyű mozgatása

Előnyök

- Könnyen tisztántartható, résmentes kivitel
- Strapabíró, merev szerkezet
- Az 1050 mm-nél hosszabb asztalok 6 kerekkel készülnek, 2 kerék fékeezhető

További lehetőségek

- Teherbírása megegyezik a telepített asztaléval, "L"-től függően 100 kg és 200 kg között változik
- A négy, vagy hat kerék közül kettő fékeezhető
- A kerék "D" átmérője minden asztalnál 100 mm

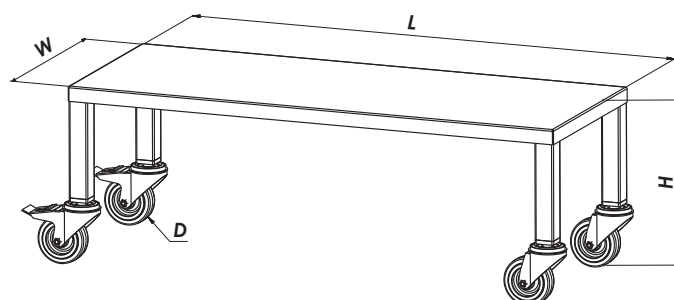

Kötött lábú telepített és görgős asztalok

Kötött lábú telepített asztalok

Funkciók


- A laboratóriumi műveletek elvégzésének helye
- Műszerek, készülékek, állványok stb. elhelyezése

Előnyök

- Hézagoktól mentes
- Egyszerűen tisztítható, fertőtleníthető
- Könnyű, erős kialakítás

További lehetőségek

- Eszközök, anyagok tárolására is használható
- A teherbírás az asztal "L" szélességétől függ, amely 100 kg-tól 200 kg-ig terjed

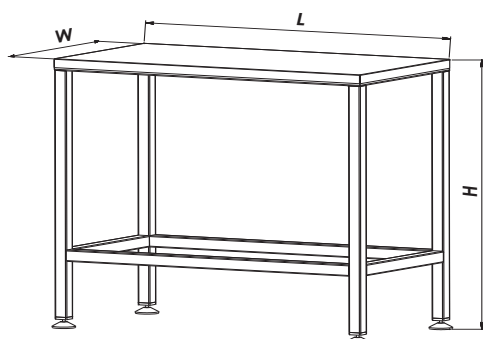

Kötött lábú görgős asztalok

Funkciók


- A laboratóriumi műveletek elvégzése után a műszerek, készülékek, eszközök, minták könnyen mozgathatók
- Ideiglenes áthelyezések során is alkalmazhatók

Előnyök

- Hézagmentes kialakítás
- Egyszerűen tisztítható, fertőtleníthető
- Könnyű, erős szerkezet

További lehetőségek

- A teherbírás ugyanaz, mint a telepített asztalnál, 100 kg-tól és 200 kg-ig terjed
- A négy kerék közül kettő fékezhető
- A "D" kerékátmérő minden esetben 100 mm

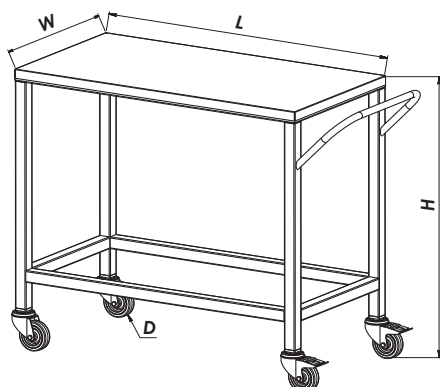

Kódszám		Méret, mm L x W x H
Kötött lábú telepített asztal	Kötött lábú görgős asztal	
TTAK600400900	TTAKG600400900	600x400x900
TTAK750400900	TTAKG750400900	750x400x900
TTAK900400900	TTAKG900400900	900x400x900
TTAK1050400900	TTAKG1050400900	1050x400x900
TTAK1200400900	TTAKG1200400900	1200x400x900
TTAK1350400900	TTAKG1350400900	1350x400x900
TTAK1500400900	TTAKG1500400900	1500x400x900
TTAK600550900	TTAKG600550900	600x550x900
TTAK750550900	TTAKG750550900	750x550x900
TTAK900550900	TTAKG900550900	900x550x900
TTAK1050550900	TTAKG1050550900	1050x550x900
TTAK1200550900	TTAKG1200550900	1200x550x900
TTAK1350550900	TTAKG1350550900	1350x550x900
TTAK1500550900	TTAKG1500550900	1500x550x900
TTAK750700900	TTAKG750700900	750x700x900
TTAK900700900	TTAKG900700900	900x700x900
TTAK1050700900	TTAKG1050700900	1050x700x900
TTAK1200700900	TTAKG1200700900	1200x700x900
TTAK1350700900	TTAKG1350700900	1350x700x900
TTAK1500700900	TTAKG1500700900	1500x700x900



Kötött lábú telepített és görgős asztal

Polcos telepített és görgős asztalok

Kódszám		Méretetek, mm
Polcos telepített asztal	Polcos görgős asztal	L x W x H
TTAP600400900	TTAPG600400900	600x400x900
TTAP750400900	TTAPG750400900	750x400x900
TTAP900400900	TTAPG900400900	900x400x900
TTAP1050400900	TTAPG1050400900	1050x400x900
TTAP1200400900	TTAPG1200400900	1200x400x900
TTAP1350400900	TTAPG1350400900	1350x400x900
TTAP1500400900	TTAPG1500400900	1500x400x900
TTAP600550900	TTAPG600550900	600x550x900
TTAP750550900	TTAPG750550900	750x550x900
TTAP900550900	TTAPG900550900	900x550x900
TTAP1050550900	TTAPG1050550900	1050x550x900
TTAP1200550900	TTAPG1200550900	1200x550x900
TTAP1350550900	TTAPG1350550900	1350x550x900
TTAP1500550900	TTAPG1500550900	1500x550x900
TTAP750700900	TTAPG750700900	750x700x900
TTAP900700900	TTAPG900700900	900x700x900
TTAP1050700900	TTAPG1050700900	1050x700x900
TTAP1200700900	TTAPG1200700900	1200x700x900
TTAP1350700900	TTAPG1350700900	1350x700x900
TTAP1500700900	TTAPG1500700900	1500x700x900

Polcos telepített asztalok

Funkciók


- Az asztallap alatt, a lábak között adott magasságban külön polc helyezkedik el, amely helytakarékos megoldást jelent különböző eszközök elhelyezésére

Előnyök

- Plusz tárolófelület
- Résmentes, könnyen tisztítható és fertőtleníthető
- Stabil, erős szerkezet

További lehetőségek

- A teherbírást az asztal "L" szélessége befolyásolja, amely 100 kg-tól 200 kg-ig terjed
- Az asztallap és a polc közötti "h1" távolság 700 mm

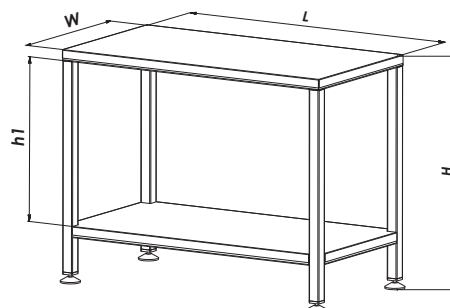

Polcos görgős asztalok

Funkciók



- A polcos asztalt bármelyik irányba könnyű elmozdítani, mivel négy keréssel rendelkezik.

Előnyök

- Mobil kialakítás, plusz tárolófelülettel
- Egyszerűen tisztítható, fertőtleníthető
- Könnyű, erős szerkezet

További lehetőségek

- A teherbírás megegyezik a telepített asztalával, 100 kg és 200 kg között változik, "L" mérettől függően
- Mindegyik asztalnál a "D" kerékméret 100 mm, a "h1" magasság pedig 700 mm
- A négy önbeálló kerék közül kettő fékeezhető

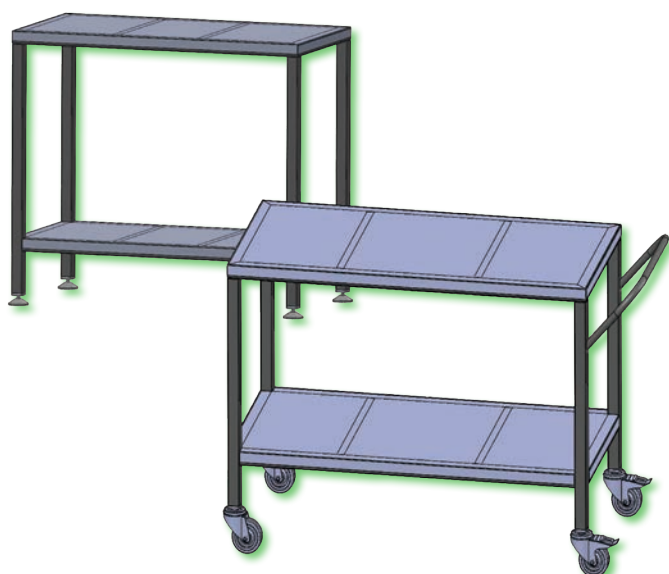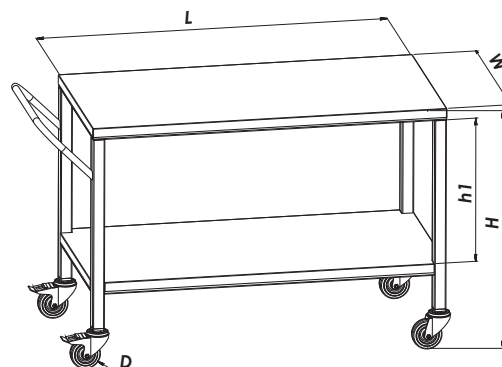

Polcos telepített és görgős asztal

Féloldalas polcos görgős asztalok

Funkciók

- A féloldalasán nyitott polcos asztal jellemzője, hogy a lábak között adott magasságban tárolás céljára külön polc van kiépítve, amely helytakarékos megoldásként különböző laboresszközök elhelyezését teszi lehetővé.
- A polcos asztalt a négy darab önbeálló keréknek köszönhetően bármelyik irányba könnyű elmozdítani



Előnyök

- Könnyen tisztántartható, hézagmentes kivitel
- Strapabíró, merev szerkezet
- Egyszerűen tisztítható, fertőtleníthető
- Plusz tárolófelület
- A féloldalasán nyitott megoldás miatt a polcon túlméretes eszközök is elhelyezhetők
- Nagyobb méretű műszerek, készülékek áthelyezésénél szállítókocsinak is alkalmas
- Leesés ellen a tárgyakat 3 oldalról keret védi

További lehetőségek

- Az alsó polc teherbírása az asztal "L" szélességétől függ, amely 100 - 200 kg, míg a felső polc terhelhetősége max. 30 kg lehet
- Az asztallap és a polc közötti "h1" távolság 700 mm, a „D” keréktátmérő 100 mm mindegyik asztal esetében
- A rögzítést két fékezhető kerék biztosítja

Kódszám	Méretetek, mm	
	L x W x H	h1
TTAPGF600400900	600x400x900	700
TTAPGF750400900	750x400x900	
TTAPGF900400900	900x400x900	
TTAPGF1050400900	1050x400x900	
TTAPGF1200400900	1200x400x900	
TTAPGF1350400900	1350x400x900	
TTAPGF1500400900	1500x400x900	
TTAPGF600550900	600x550x900	
TTAPGF750550900	750x550x900	
TTAPGF900550900	900x550x900	
TTAPGF1050550900	1050x550x900	
TTAPGF1200550900	1200x550x900	
TTAPGF1350550900	1350x550x900	
TTAPGF1500550900	1500x550x900	
TTAPGF750700900	750x700x900	
TTAPGF900700900	900x700x900	
TTAPGF1050700900	1050x700x900	
TTAPGF1200700900	1200x700x900	
TTAPGF1350700900	1350x700x900	
TTAPGF1500700900	1500x700x900	

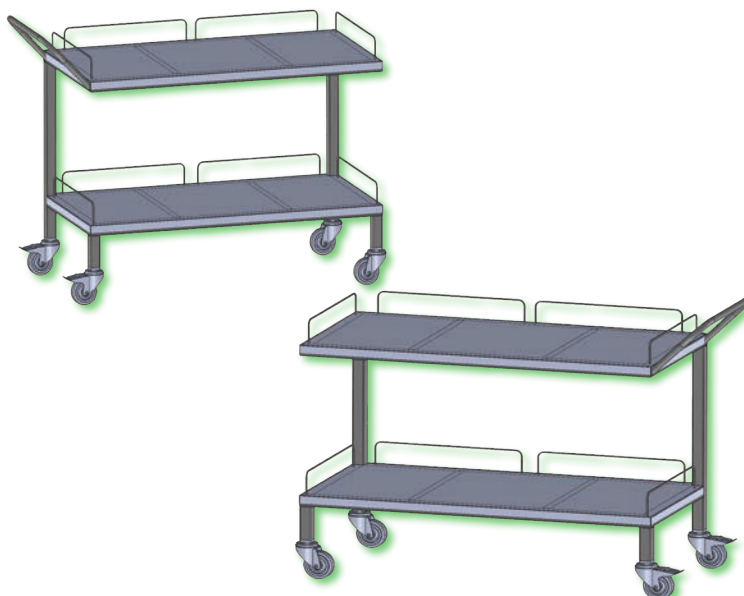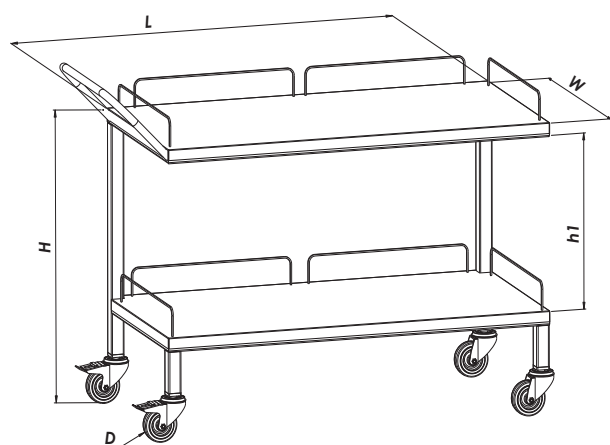

Féloldalas polcos görgős asztal

Perforált munkalapú telepített és görgős asztalok

Kódszám		Méret, mm
Perforált munkalapú telepített asztal	Perforált munkalapú görgős asztal	L x W x H
TTAPE600400900	TTAPEG600400900	600x400x900
TTAPE750400900	TTAPEG750400900	750x400x900
TTAPE900400900	TTAPEG900400900	900x400x900
TTAPE1050400900	TTAPEG1050400900	1050x400x900
TTAPE1200400900	TTAPEG1200400900	1200x400x900
TTAPE1350400900	TTAPEG1350400900	1350x400x900
TTAPE1500400900	TTAPEG1500400900	1500x400x900
TTAPE600550900	TTAPEG600550900	600x550x900
TTAPE750550900	TTAPEG750550900	750x550x900
TTAPE900550900	TTAPEG900550900	900x550x900
TTAPE1050550900	TTAPEG1050550900	1050x550x900
TTAPE1200550900	TTAPEG1200550900	1200x550x900
TTAPE1350550900	TTAPEG1350550900	1350x550x900
TTAPE1500550900	TTAPEG1500550900	1500x550x900
TTAPE750700900	TTAPEG750700900	750x700x900
TTAPE900700900	TTAPEG900700900	900x700x900
TTAPE1050700900	TTAPEG1050700900	1050x700x900
TTAPE1200700900	TTAPEG1200700900	1200x700x900
TTAPE1350700900	TTAPEG1350700900	1350x700x900
TTAPE1500700900	TTAPEG1500700900	1500x700x900



Perforált munkalapú telepített és görgős asztal

Perforált munkalapú telepített asztalok

Funkciók


- Olyan helyeken használatosak, ahol az asztal lapján keresztül levegőáramlás szükséges (pl. szárítás)

Előnyök

- Hézagmentes, egyszerű tisztítani, fertőtleníteni
- Könnyű, merev szerkezet

További lehetőségek

- A perforált munkalap rezgéselnyelő tulajdonságú
- Teherbírása az "L" méret függvényében 80 - 150 kg között

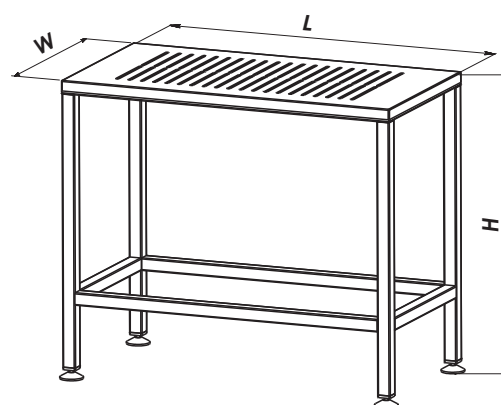

Perforált munkalapú görgős asztalok

Funkciók


- Biztosított a minden irányú, egyszerű helyváltoztatás
- Ideiglenes áthelyezések során is alkalmazható

Előnyök

- Hézagmentes, egyszerű tisztítás, fertőtlenítés
- Stabil, erős felépítés

További lehetőségek

- Teherbírása megegyezik a fentivel, azaz "L" mérettől függően 80 - 150 kg
- A két fékező kerékkel megbízhatóan rögzíthető
- A kerék "D" átmérője minden asztalnál 100 mm

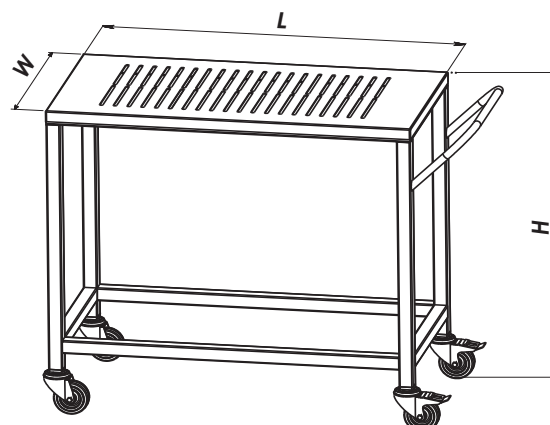

Mosogató asztalok

Perem nélküli mosogató asztalok

Funkciók


- A mosogató asztalok az asztallapba épített egymedencés mosogatóedénnyel készülnek
- Biztosítja az ismételt felhasználásra kerülő labor-eszközök tisztítását

Előnyök

- Az asztal erős, fix felépítésű, könnyűszerrel a vízvételi és szennyvíz elvezető csatlakozáshoz illeszthető
- Egyszerű tisztítás és fertőtlenítés

További lehetőségek

- A medence "l1" és "w1" mérete minden mosogató-asztalnál 450 mm

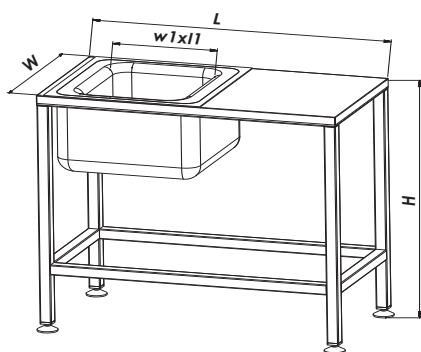

Peremes mosogató asztalok

Funkciók


- Asztallapba épített egymedencés mosogatóedény
- A perem megakadályozza, hogy az elmosandó edényekből esetlegesen az asztal lapjára kerülő vegyszermaradék a padozatra kerüljön

Előnyök


- Fix felépítés, egyszerű illesztés vízvételi és szennyvíz elvezető csatlakozáshoz

További lehetőségek


- A medence "l1" és "w1" mérete egységesen 450 mm

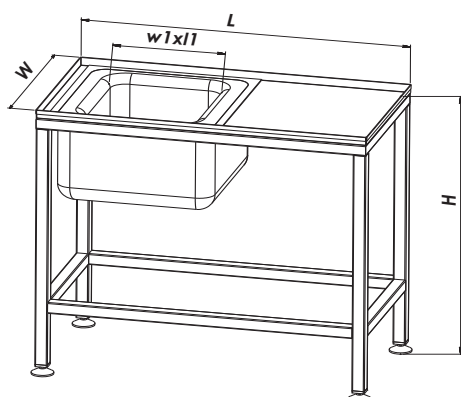

Kódszám		Méretetek, mm
Mosogató asztal, perem nélkül	Mosogató asztal, peremmel	L x W x H
TTAM750600900	TTAMP750600900	750x600x900
TTAM900600900	TTAMP900600900	900x600x900
TTAM1050600900	TTAMP1050600900	1050x600x900
TTAM1200600900	TTAMP1200600900	1200x600x900
TTAM1350600900	TTAMP1350600900	1350x600x900
TTAM1500600900	TTAMP1500600900	1500x600x900
TTAM900750900	TTAMP900750900	900x750x900
TTAM1050750900	TTAMP1050750900	1050x750x900
TTAM1200750900	TTAMP1200750900	1200x750x900
TTAM1350750900	TTAMP1350750900	1350x750x900
TTAM1500750900	TTAMP1500750900	1500x750x900

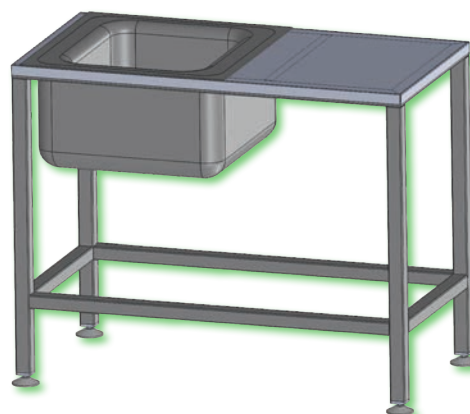


Perem nélküli mosogató asztal

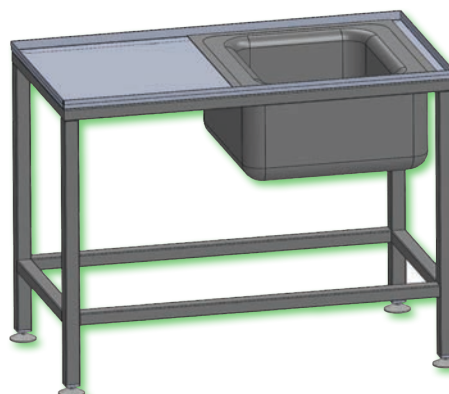

Peremes mosogató asztal

Számítógép asztalok

Kódszám	Méretetek, mm	
	L x W x H	l1
TTAPCRT1000600900	1000x600x900	600
TTAPCRT1200600900	1200x600x900	600
TTAPCRT1500600900	1500x600x900	600

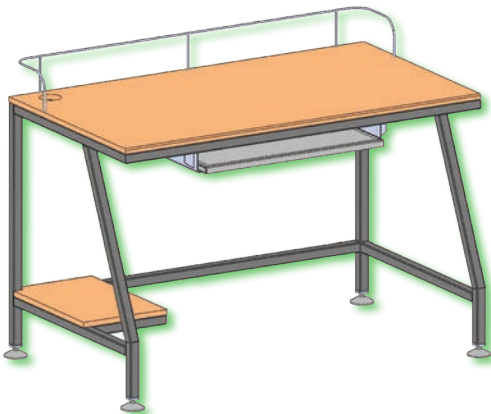

Számítógép asztal

Funkciók


- Az asztallapra a monitor és a nyomtató tehető
- A többi egység a lenti polcon és a billentyűzettartó lapon kap helyet

Előnyök

- Az asztallap köré kialakított tartókeret meggátolja a ráhelyezett eszközök leesését


További lehetőségek

- Billegésmentes beállítás színtező lábak segítségével
- A sík felületek anyaga Trespa TopLab fenolgyanta lap

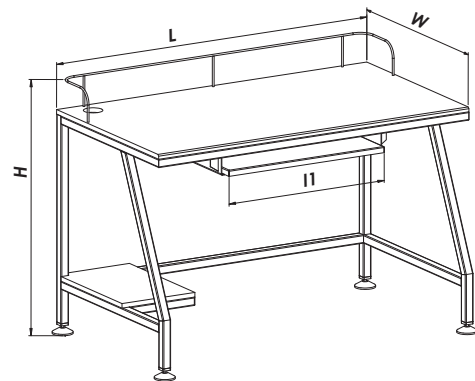

Fiókos asztalok

Kódszám	Méretetek, mm	
	L x W x H	l2
TTAFRT10006001800	1000x600x1800	350
TTAFRT12006001800	1200x600x1800	550
TTAFRT15006001800	1500x600x1800	850

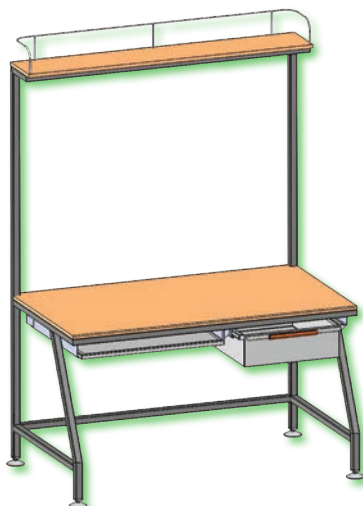

Fiókos asztal

Funkciók


- Általános célú asztal laboratóriumi adminisztrációhoz
- Számítógép asztalnak is alkalmas

Előnyök

- A felső polcra szakkönyvek tehető

További lehetőségek

- Billegésmentes beállítás színtező lábak segítségével
- A sík felületek anyaga Trespa TopLab fenolgyanta lap
- Azonos méretek: "w1" 200, "w2" 500, "h1" 800, "h2" 200, "l1" 600 mm

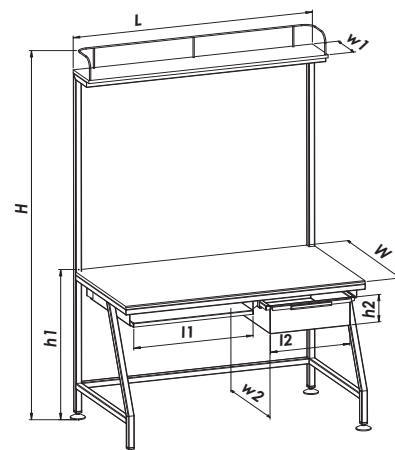



Polcok

Nyitott polcok


Kódszám	Méretek, mm			
	L x W x H	h1, h2	h3	h4
TTPNY6004001800	600x400x1800	250	350	650
TTPNY7504001800	750x400x1800			
TTPNY9004001800	900x400x1800			
TTPNY10504001800	1050x400x1800			
TTPNY12004001800	1200x400x1800			
TTPNY13504001800	1350x400x1800			
TTPNY15004001800	1500x400x1800			
TTPNY6005501800	600x550x1800			
TTPNY7505501800	750x550x1800			
TTPNY9005501800	900x550x1800			
TTPNY10505501800	1050x550x1800			
TTPNY12005501800	1200x550x1800			
TTPNY13505501800	1350x550x1800			
TTPNY15005501800	1500x550x1800			
TTPNY6004002000	600x400x2000	300	450	
TTPNY7504002000	750x400x2000			
TTPNY9004002000	900x400x2000			
TTPNY10504002000	1050x400x2000			
TTPNY12004002000	1200x400x2000			
TTPNY13504002000	1350x400x2000			
TTPNY15004002000	1500x400x2000			
TTPNY6005502000	600x550x2000			
TTPNY7505502000	750x550x2000			
TTPNY9005502000	900x550x2000			
TTPNY10505502000	1050x550x2000			
TTPNY12005502000	1200x550x2000			
TTPNY13505502000	1350x550x2000			
TTPNY15005502000	1500x550x2000			

Zárt polcok

Kódszám	Méretetek, mm	
	L x W x H	h1 - h4
TTPZ6003001800	600x300x1800	380
TTPZ7503001800	750x300x1800	
TTPZ9003001800	900x300x1800	
TTPZ10503001800	1050x300x1800	
TTPZ12003001800	1200x300x1800	
TTPZ13503001800	1350x300x1800	
TTPZ15003001800	1500x300x1800	
TTPZ16503001800	1650x300x1800	
TTPZ18003001800	1800x300x1800	
TTPZ6004001800	600x400x1800	
TTPZ7504001800	750x400x1800	
TTPZ9004001800	900x400x1800	
TTPZ10504001800	1050x400x1800	
TTPZ12004001800	1200x400x1800	
TTPZ13504001800	1350x400x1800	
TTPZ15004001800	1500x400x1800	
TTPZ16504001800	1650x400x1800	
TTPZ18004001800	1800x400x1800	
TTPZ6005001800	600x500x1800	
TTPZ7505001800	750x500x1800	
TTPZ9005001800	900x500x1800	
TTPZ10505001800	1050x500x1800	
TTPZ12005001800	1200x500x1800	
TTPZ13505001800	1350x500x1800	
TTPZ15005001800	1500x500x1800	
TTPZ16505001800	1650x500x1800	
TTPZ18005001800	1800x500x1800	

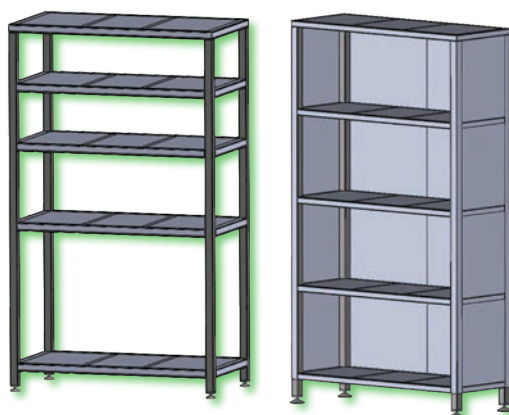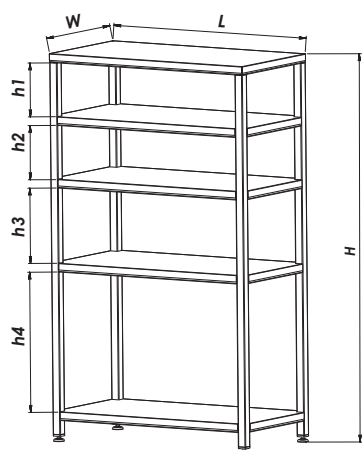

Nyitott és zárt polc

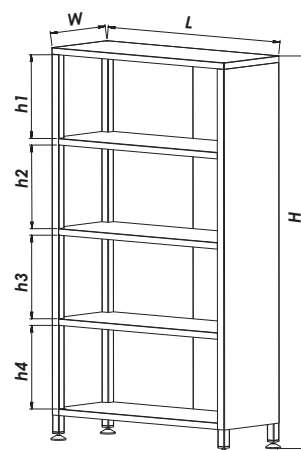

Zárt polcok

Funkciók

- A zárt polcok egyoldalú hozzáférést biztosítanak, ezeket célszerű a fal mellett elhelyezni

Előnyök

- A zárt hátfalnak köszönhetően a polc körüli tér lehatárolásával csökkenti a por beáramlását
- Zártszelvény váz, résmentes, polírozott felület

További lehetőségek

- Teherbírása megegyezik a nyitott polcéval, azaz 40 - 120 kg polconként, az "L" mérettől függően
- A polcok közötti "h1 - h4" távolság azonos, 380 mm

Ülőpolcok

Kódszám		Méret, mm
Nyitott ülőpolc	Zárt ülőpolc	L x W x H
TTPÜNY600300500	TTPÜZ600300500	600x300x500
TTPÜNY750300500	TTPÜZ750300500	750x300x500
TTPÜNY900300500	TTPÜZ900300500	900x300x500
TTPÜNY1050300500	TTPÜZ1050300500	1050x300x500
TTPÜNY1200300500	TTPÜZ1200300500	1200x300x500
TTPÜNY1350300500	TTPÜZ1350300500	1350x300x500
TTPÜNY1500300500	TTPÜZ1500300500	1500x300x500
TTPÜNY600450500	TTPÜZ600450500	600x450x500
TTPÜNY750450500	TTPÜZ750450500	750x450x500
TTPÜNY900450500	TTPÜZ900450500	900x450x500
TTPÜNY1050450500	TTPÜZ1050450500	1050x450x500
TTPÜNY1200450500	TTPÜZ1200450500	1200x450x500
TTPÜNY1350450500	TTPÜZ1350450500	1350x450x500
TTPÜNY1500450500	TTPÜZ1500450500	1500x450x500

Nyitott polcok

Funkciók

- A tárolásra szolgáló nyitott polcok a labor bármely részében, fal mellett, vagy különállóan is elhelyezhetők

Előnyök

- Zártszelvény váz, résmentes, polírozott felület
- Nyitottsága révén mindkét oldalról hozzáférést biztosít a rajta lévő eszközökhöz

További lehetőségek

- Teherbírási polconként 40 - 120 kg, az "L" szélességtől függően
- A „h4” méret minden polcnál 650 mm

Nyitott és zárt ülőpolcok

Funkciók


- Az ülőpolcok egyfajta pihenőpadok, ezek polcán lehet tárolni a cipőket, papucsokat átöltözéskor
- A kétoldali hozzáférést biztosító nyitott ülőpolc a terem közepén is elhelyezhető, az egyoldalú hozzáférést zárt változatot fal mellé célszerű tenni

Előnyök


- Esztétikus, merev szerkezet
- A zárt ülőpolcnál a hátsó burkolat a teret lezárja, egyben megakadályozza a por beáramlását

További lehetőségek

- Az ülőpolcok teherbírási az "L" szélességtől függ, értéke 40 - 120 kg
- A kétféle ülőpolc minden mérete azonos, a szerkezeti eltérést a zárt változatnál a lemezzel lezárt hátoldal jelenti
- A polcok közötti „h1” és „h2” távolság egységesen 170 mm

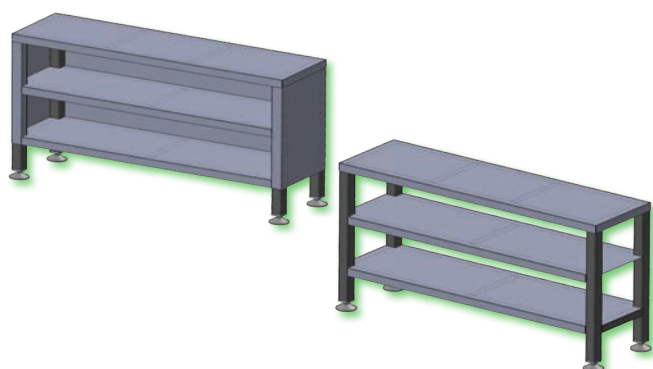

Nyitott és zárt ülőpolc

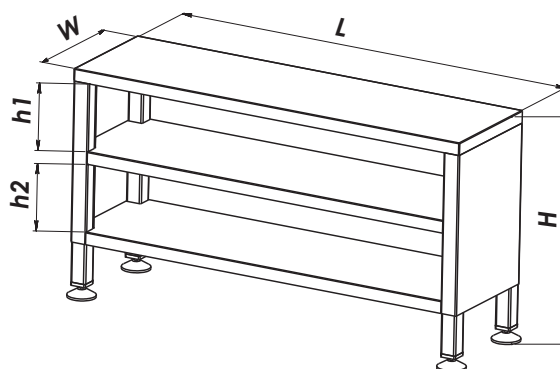

Szekrények

Zárható ajtós szekrények

Funkciók


- A szekrények zártszelvény kerettel készülnek, körben lehatárolt burkolattal
- A szekrények lemezből kialakított, merevítővel ellátott polcokkal vannak ellátva
- Az ajtók lemezbetétes kialakításúak, 180°-ban nyílnak, és kulccsal zárhatók

Előnyök

- A szekrény lábakkal rendelkezik, amelyek a labor takaríthatóságát biztosítják
- A lábak száma az 1 és 2 ajtós szekrényeknél 4 db, míg a 3 ajtósánál 6 db

További lehetőségek

- A polcok teherbírása a szekrény "L" szélességétől függően 40 - 150 kg, egy polc esetén

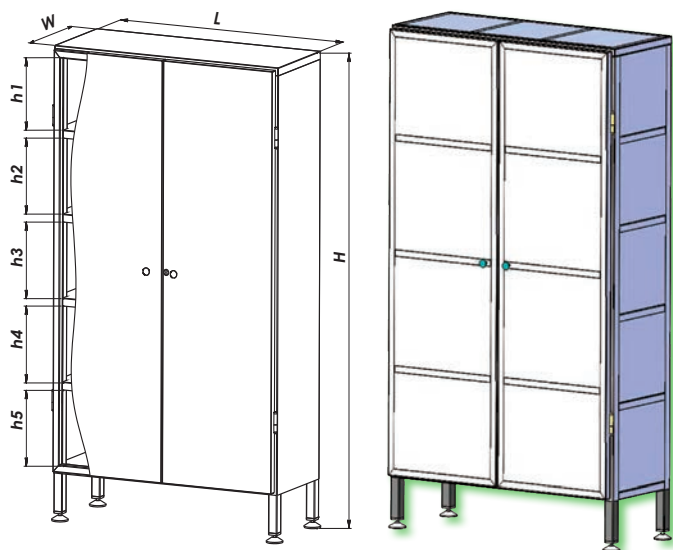

Zárható ajtós szekrény

Kódszám	Méretetek, mm		Ajtók száma
	L x W x H	h1 - h5	
TTSZ6003001600	600x300x1600	250	1
TTSZ7503001600	750x300x1600		2
TTSZ9003001600	900x300x1600		
TTSZ10503001600	1050x300x1600		
TTSZ12003001600	1200x300x1600		3
TTSZ13503001600	1350x300x1600		
TTSZ15003001600	1500x300x1600		
TTSZ16503001600	1650x300x1600		1
TTSZ18003001600	1800x300x1600		
TTSZ6004001600	600x400x1600		
TTSZ7504001600	750x400x1600	2	2
TTSZ9004001600	900x400x1600		
TTSZ10504001600	1050x400x1600		
TTSZ12004001600	1200x400x1600		3
TTSZ13504001600	1350x400x1600		
TTSZ15004001600	1500x400x1600		
TTSZ16504001600	1650x400x1600	300	1
TTSZ18004001600	1800x400x1600		
TTSZ6004001800	600x400x1800		2
TTSZ7504001800	750x400x1800		
TTSZ9004001800	900x400x1800		
TTSZ10504001800	1050x400x1800		3
TTSZ12004001800	1200x400x1800		
TTSZ13504001800	1350x400x1800		
TTSZ15004001800	1500x400x1800		
TTSZ16504001800	1650x400x1800		
TTSZ18004001800	1800x400x1800		

Nyitott rekeszes szekrények (Box/Fach típus)

- Esztétikus, merev szerkezet
- A boxok könnyen tisztíthatók
- A rekeszek hátsó burkolata lezárja a teret, ezáltal megakadályozza a por beáramlását

További lehetőségek

- A rekeszek „h1 – h6” magassága és „l1 - l8” szélessége minden esetben 250 mm
- A lábak száma 4 db, kivéve az L = 1950 mm és 2220 mm szélességű rekeszes szekrényeket, ezek 6 lábbal készülnek



Funkciók

- A rekeszes szekrények általában felcímkézett laboratóriumi, vagy egyéb minták tárolására szolgálnak
- Zártszelvény keret alkotja, lemez elválasztó és burkoló elemekkel
- Praktikus, könnyen használható kialakítás

Előnyök

- A lábak a könnyű takaríthatóságot biztosítják



Kódszám	Rekeszek száma	Méretetek, mm		
		L x W x H	h1 - h6	l1 - l8
TTB6002501800	12	600x250x1800	250	250 ("L" - től függően)
TTB8702501800	18	870x250x1800		
TTB11402501800	24	1140x250x1800		
TTB14102501800	30	1410x250x1800		
TTB16802501800	36	1680x250x1800		
TTB19502501800	42	1950x250x1800		
TTB22202501800	48	2220x250x1800		
TTB6003501800	12	600x350x1800		
TTB8703501800	18	870x350x1800		
TTB11403501800	24	1140x350x1800		
TTB14103501800	30	1410x350x1800		
TTB16803501800	36	1680x350x1800		
TTB19503501800	42	1950x350x1800		
TTB22203501800	48	2220x350x1800		

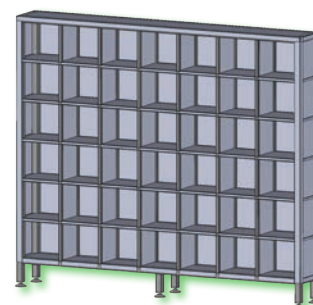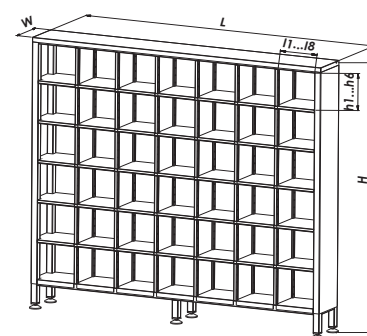

Nyitott rekeszes szekrény

Fiókos telepített és görgős kisszekrények

Kódszám		Méretetek, mm			
Fiókos telepített kisszekrény	Fiókos görgős kisszekrény	L x W x H	h1	h2	h3
TTSZKF300400800	TTSZKFG300400800	300x400x800	210	210	210
TTSZKF300400900	TTSZKFG300400900	300x400x900	240	240	240
TTSZKF300500800	TTSZKFG300500800	300x500x800	210	210	210
TTSZKF300500900	TTSZKFG300500900	300x500x900	240	240	240
TTSZKF400500800	TTSZKFG400500800	400x500x800	210	210	210
TTSZKF400500900	TTSZKFG400500900	400x500x900	240	240	240

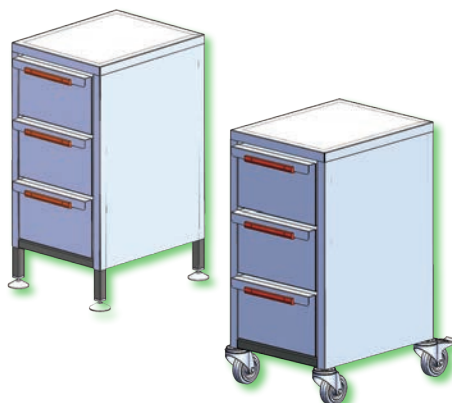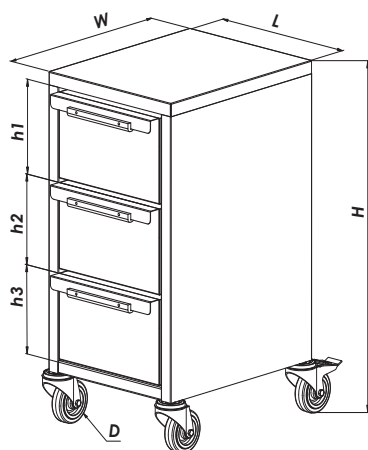

Fiókos telepített és görgős kisszekrény

Funkciók

- A fiókos szekrény lehetővé teszi a kisebb méretű eszközök biztonságos elhelyezését
- A görgőkön mozgó fiókokat könnyen lehet kihúzni - betolni
- A fiókok belső tere egyszerűen tisztítható

Előnyök

- A szekrény teteje sík burkolólemez, munkalapként is használható, amelyen többfajta laborszerszám lehet elhelyezni
- A fiókok kulccsal zárhatók
- Esztétikus megjelenés
- A lábak a szekrény alatti takarítási hatóságot biztosítják

További lehetőségek

- A görgős kisszekrény négy darab önbeállós keréken bármikor elmozdítható
- A 4 kerékből kettőt rögzíteni lehet
- A „D” keréktátré minden szekrény esetén 100 mm
- A telepített és görgős kisszekrények mérete és felépítése - a kerekektől eltekintve - azonos

Állványok

Tálcás telepített és görgős állványok

Funkciók

- A laboratóriumokban sok esetben szükség lehet eszközök, anyagok különböző magasságú tálcákon való elhelyezésére
- Ezt indokolhatja a villamos vezetékek, csővezetékek, hajlékony bekötővezetékek hosszának mérete, a terem szűkossége stb.
- A tálcás állványok fix és görgős kialakításúak, peremes tálcával



Előnyök

- A tálca pereme a leesést gátolja, ugyanakkor az esetlegesen kifolyó anyagokat is felfogja
- A görgős állványok mobilisak, a kerekek rögzíthetők
- Könnyen tisztítható, fertőtleníthető

További lehetőségek

- A fix és görgős tálcás állványok mérete és formája azonos, eltekintve a kerekektől
- Az állványok „H” magassága 900 mm, míg a „W1” és „L1” méretek (lábkereszt) egységesen 700 mm
- A „D” keréktátmérő 100 mm

Kódszám		Méretek, mm		
Tálcás telepített állvány	Tálcás görgős állvány	W	L	h1, h2, h3
TTÁT500300	TTÁTG500300	300	500	20, 300, 300
TTÁT400500	TTÁTG400500	400	500	
TTÁT300600	TTÁTG300600	300	600	
TTÁT400600	TTÁTG400600	400	600	
TTÁT350550	TTÁTG350550	350	550	
TTÁT450450	TTÁTG450450	450	450	

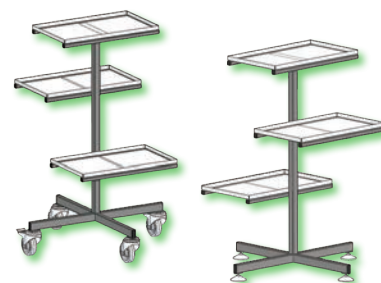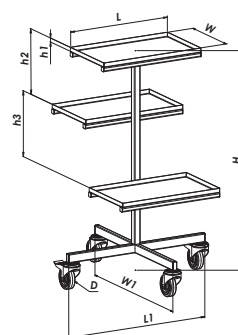

Tálcás telepített és görgős állvány

Kosaras telepített és görgős állványok

Kódszám		Méretek, mm						
Kosaras telepített állvány	Kosaras görgős állvány	L x W x H	I1, I4	I2, I3	w1	w2	w3	h1
TTÁKLR500250900160	TTÁKLRG500250900160	500x250x900	100	150	80	80	80	160
TTÁKLR500300900160	TTÁKLRG500300900160	500x300x900			100	100	100	
TTÁKLR500350900160	TTÁKLRG500350900160	500x350x900			116	116	116	
TTÁKLR500400900160	TTÁKLRG500400900160	500x400x900			133	133	133	
TTÁKLR500250900220	TTÁKLRG500250900220	500x250x900			80	80	80	220
TTÁKLR500300900220	TTÁKLRG500300900220	500x300x900			100	100	100	
TTÁKLR500350900220	TTÁKLRG500350900220	500x350x900			116	116	116	
TTÁKLR500400900220	TTÁKLRG500400900220	500x400x900			133	133	133	

Funkciók



- A kosár rácsozattal rendelkezik, rekeszekre van osztva, levehető, és külön szállítható
- A kosárban egyszerre lehet az üvegedényeket törés veszélye nélkül mosogatni, szárítani és sterilizálni

Előnyök

- Stabil kialakítás, egyszerre egy kosár is használható

További lehetőségek


- A fix és görgős változat mérete és formája azonos
- A lábkereszt „W1” és „L1” mérete azonos, 700 mm
- A „D” keréktátmérő 100 mm

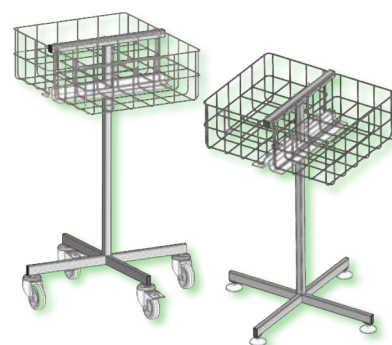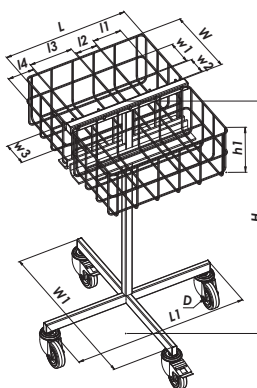

Kosaras telepített és görgős állvány

Univerzális telepített és görgős állványok

Kódszám		Méretetek, mm
Univerzális telepített állvány	Univerzális görgős állvány	L x W x H
TTÁU700700800	TTÁUG700700800	700x700x800
TTÁU700700900	TTÁUG700700900	700x700x900

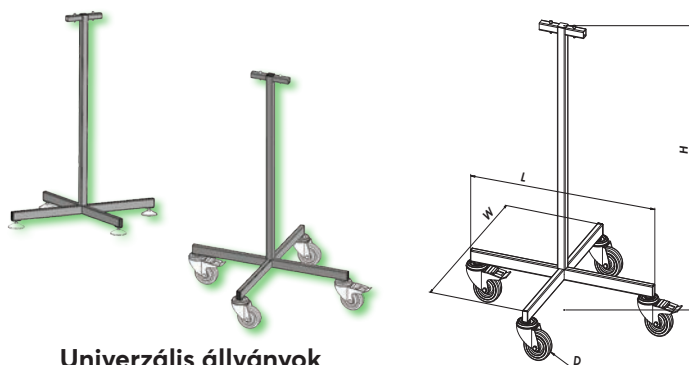

Univerzális állványok

Funkciók

- Az univerzális állványok a rendelkezésre álló, és a következőkben bemutatásra kerülő többféle tartozéknak köszönhetően a labortechnikában sokrétűen használhatók
- Felfogatás után a tartozékot csavarral szükséges rögzíteni

Előnyök



- Stabil, elektropolírozott kialakítás
- Egyszerre két tartozék is felszerelhető, de eggyel is lehet használni
- A görgős változat mobil alkalmazást tesz lehetővé.
- A kerekek fékezhethők

További lehetőségek

- A fix és görgős változat mérete és formája megegyezik
- A kerék „D” átmérője minden típusnál 100 mm

Tálca univerzális állványokhoz

Kódszám	Méretetek, mm L x W x H
TTÁUTT500300020	500x300x20
TTÁUTT500400020	500x400x20
TTÁUTT600300020	600x300x20
TTÁUTT600400020	600x400x20

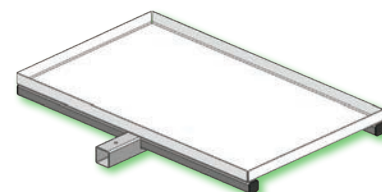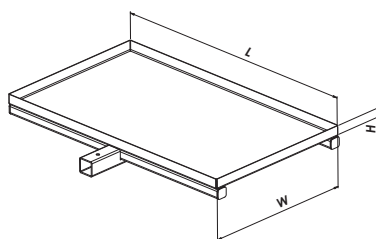

Tálca univerzális állványhoz

Funkciók

- A tálca könnyen felszerelhető az univerzális állványra, csak rá kell tolni az állványcsomokra és csavarral rögzíteni

Előnyök



- Esztétikus kialakítású, lemezből készül, melyet egy keret tart
- A tálca pereme meggátolja az eszközök leesését, ugyanakkor a véletlenül kiömlő folyadékokat is felfogja

További lehetőségek

- A tálca maximális terhelése 20 kg lehet

Doboz univerzális állványokhoz

Kódszám	Méretetek, mm L x W x H
TTÁUTD500300020	500x300x20
TTÁUTD500400020	500x400x20
TTÁUTD600300020	600x300x20
TTÁUTD600400020	600x400x20

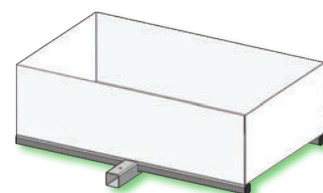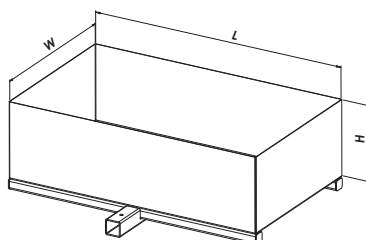


Doboz univerzális állványhoz


Funkciók

- A doboz magasított peremű tálcának felel meg, használata, felépítése és felszerelése utóbbihoz hasonló. Olyan eszközökhöz, anyagokhoz ajánlott, melyek nagysága vagy száma indokoltá teszi a doboz alkalmazását
- A maximális terhelhetőség 20 kg dobozonként

Egyterű kosár univerzális állványokhoz

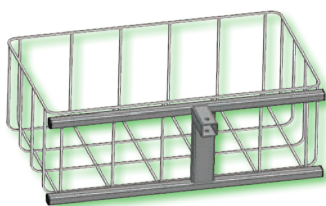

Egyterű kosár univerzális állványhoz

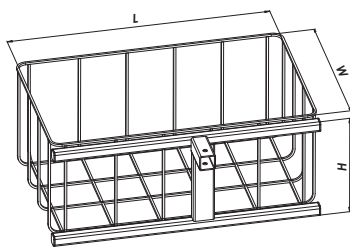

Funkciók

- Az egyterű kosár rácsozattal rendelkezik, amelyet egy keret tart egyben
- A tálcához hasonlóan egyszerűen felszerelhető, a rögzítés csavarral történik

Előnyök


- A kosárban egyszerre lehet a benne lévő edényeket tisztítani, sterilizálni

További lehetőségek


- A szárítás is egy lépésben megoldható

Kódszám	Méret, mm L x W x H
TTÁUTK500250160	500x250x160
TTÁUTK500300160	500x300x160
TTÁUTK500350160	500x350x160
TTÁUTK500400160	500x400x160
TTÁUTK500250220	500x250x220
TTÁUTK500300220	500x300x220
TTÁUTK500350220	500x350x220
TTÁUTK500400220	500x400x220

Rekeszes kosár univerzális állványokhoz

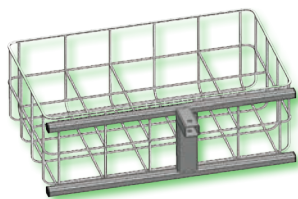

Rekeszes kosár univ. állványhoz

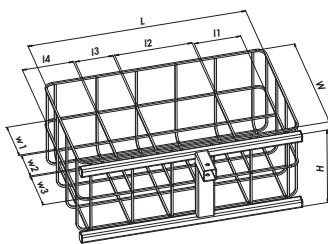

Funkciók


- A rekeszes kosár ugyanúgy használható, mint az egyterű kosár
- A rekeszes kialakítás miatt kis méretű edényekhez is alkalmas

További lehetőségek


- Az „l1” és „l4” méretek 100 mm, míg az „l2” és „l3” 150 mm

Kódszám	Méret, mm			
	L x W x H	w1	w2	w3
TTÁUTKR500250160	500x250x160	80	80	80
TTÁUTKR500300160	500x300x160	100	100	100
TTÁUTKR500350160	500x350x160	116	116	116
TTÁUTKR500400160	500x400x160	133	133	133
TTÁUTKR500250220	500x250x220	80	80	80
TTÁUTKR500300220	500x300x220	100	100	100
TTÁUTKR500350220	500x350x220	116	116	116
TTÁUTKR500400220	500x400x220	133	133	133

Billentyűzet tartó univerzális állványokhoz

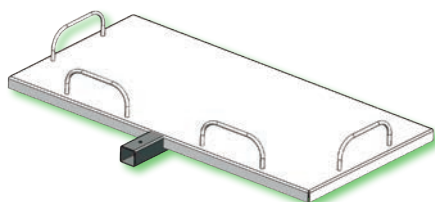

Billentyűzet tartó univerzális állványhoz

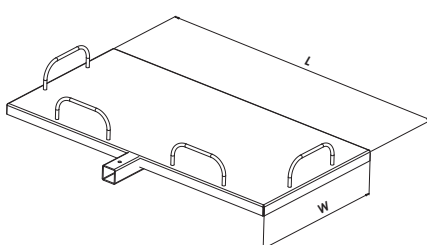

Kódszám	Méret, mm L x W
TTÁUTB500300	500x300
TTÁUTB500400	500x400
TTÁUTB600300	600x300
TTÁUTB600400	600x400

Funkciók

- Az esztétikus megjelenésű billentyűzet tartó felszerelése és csavaros rögzítése könnyen megoldható

Előnyök

- A klaviatúrát leesés ellen támaszték védi három irányból

További lehetőségek

- Ha a klaviatúra valamilyen okból nem helyezhető el a laborasztalon, de szükséges, ez a megoldás jól használható

Fali konzolok

Fix és forgatható fal konzol billentyűzet tartóval

Kódszám		Méretek, mm
Fix fal konzol	Forgatható fal konzol	L x W
TTFKB600300	TTFKBF600300	600x300
TTFKB600400	TTFKBF600400	600x400
TTFKB700300	TTFKBF700300	700x300
TTFKB700400	TTFKBF700400	700x400

Funkciók


- Egyes kis méretű laborokban szükség lehet arra, hogy ne foglaljon el asztal felületet a billentyűzet
- Erre használható a fal konzolos billentyűzet tartó, amely fix vagy forgatható változatban készül

Előnyök

- A lap kialakítása meggátolja a billentyűzet lecsúszását
- A forgatható változatnál több irányból is hozzá lehet férni a billentyűzethez

További lehetőségek



- A tartólap mérete mindkét verziónál azonos
- A faltól kinyúló kar "l1" hossza egységesen 500 mm

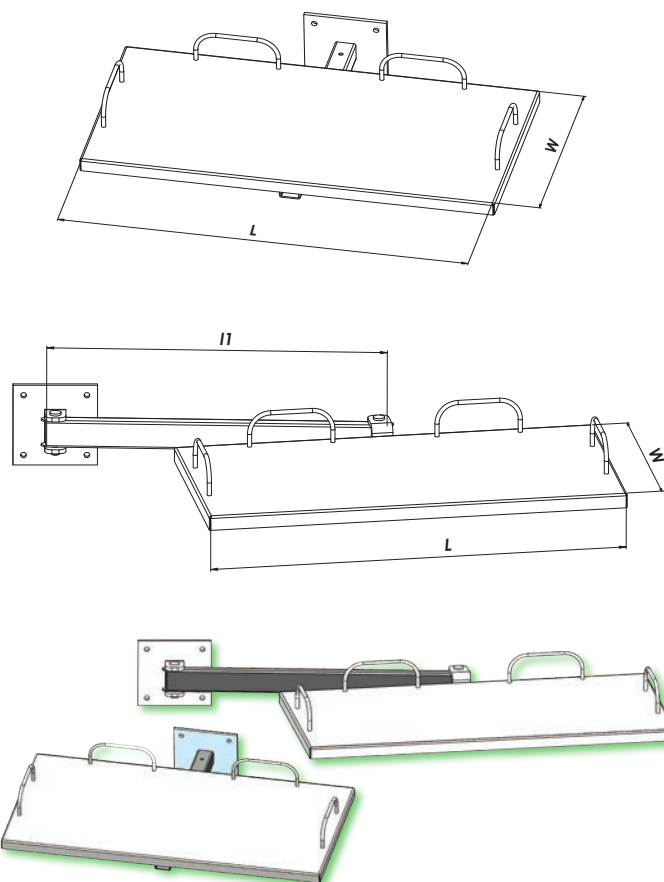

Fix és forgatható fal konzol billentyűzet tartóval

Átülőpad

Kódszám	Méretek, mm		
	L x W x H	l1	h1
TTPÁ900350450	900x350x450	500	200

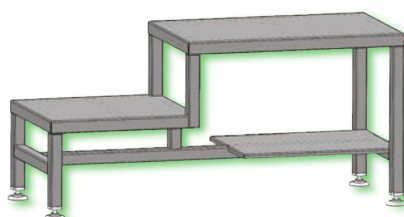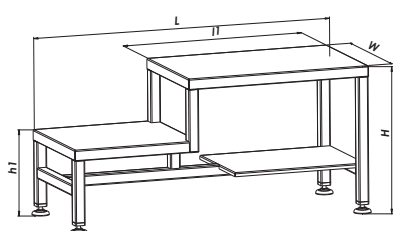

Átülőpad

Funkciók

- Az átülőpad funkciója steril cipők, cipővédők felvételének elősegítése

Előnyök


- Sima, résmentes kialakítás, elektro-polírozott felület
- Könnyű tisztítani, fertőtleníteni
- Stabil, erős szerkezet

További lehetőségek

- Az alsó polcon steril cipők, cipővédők tárolhatók
- Az átülőpad teherbírása 150 kg

Fogasok

Telepített és görgős fogasok

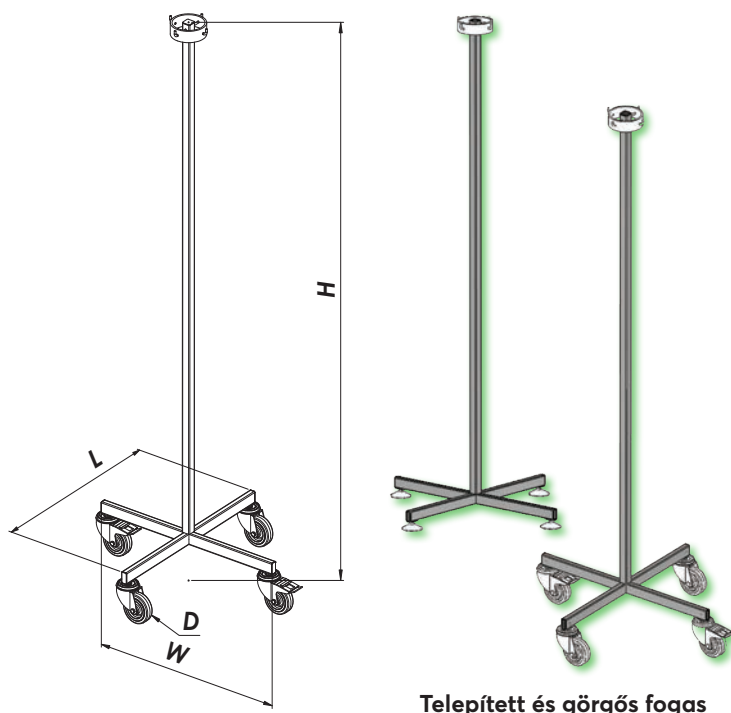

Kódszám		Méretetek, mm
Telepített fogas	Görgős fogas	L x W x H
TTF5005001800	TTFG5005001800	500x500x1800

Funkciók

- A fogasok a laboratóriumban használatos ruházat tárolására szolgálnak

Előnyök


- Stabil, esztétikus megjelenés
- Könnyen tisztítható, fertőtleníthető

További lehetőségek

- A telepített és görgős fogasok mérete és formája - a kerekeket kivéve - azonos
- A görgős változatnál a kerekek fékezhethők
- A „D” kerékátmérő 100 mm

Vállfatartók

Fali vállfatartó

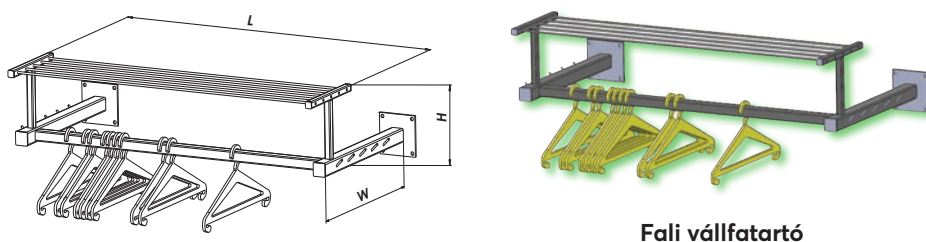

Kódszám	Méretetek, mm
	L x W x H
TTVF1050500250	1050x500x250

Funkciók

- A fixen rögzített fali vállfatartó funkciója és tárolókapacitása megegyezik a következőkben ismertetésre kerülő telepített és görgős vállfatartókkal

Előnyök



- A falhoz történő rögzítés tetszőleges magasságban, 4-4 csavarral könnyen megoldható

További lehetőségek

- A vállfák elhelyezésére szolgáló akasztós rész, valamint a felső rácsozat kialakítása és mérete ugyanaz, mint a telepített és görgős változatoknál

Telepített és görgős vállfatartók

Kódszám		Méret, mm
Telepített vállfatartó	Görgős vállfatartó	L x W x H
TTV10505002100	TTVG10505002100	1050x500x2100

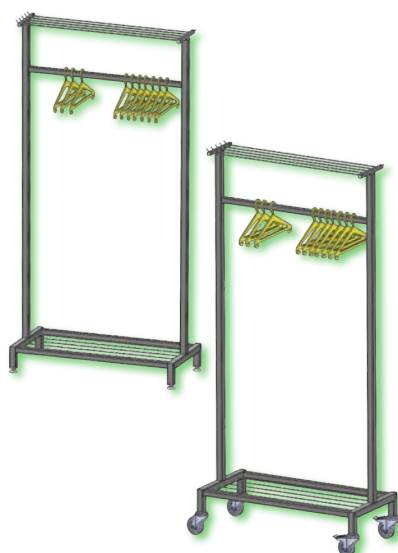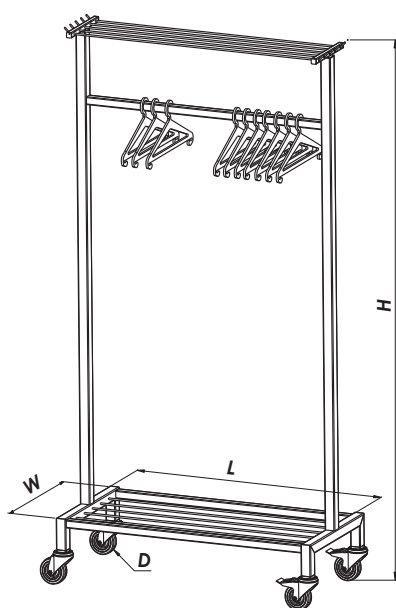

Telepített és görgős vállfatartók

Funkciók

- A vállfatartók alapvetően a tisztatéri ruházat tárolására szolgálnak
- 20 - 25 darab vállfához alkalmasak
- Kialakításukat tekintve - a vállfákra akasztott ruhák tárolása mellett - használhatók fogasszerűen felakasztott ruhaneműk elhelyezésére

Előnyök

- A felső részen található rácsozaton különböző, nem felakasztható, steril és nem steril eszközöket lehet elhelyezni
- A görgős változat könnyű helyváltoztatást tesz lehetővé
- A kerekek közül kettő fékeezhető

További lehetőségek

- A telepített és görgős változatú vállfatartók mérete és formája megegyezik
- A "D" kerékátmérő 100 mm
- A vállfatartó alsó részében kialakított tartón cipőket is el lehet helyezni

DeLabo laboratóriumi bútorok, vegyifülkék

Az előzőekben ismertetett tisztatéri rozsdamentes acél bútorok mellett szíves figyelmükbe ajánljuk a DeLabo által készített, elemes felépítésű laboratóriumi bútorcsaládot, amely a következő elemekből áll:

- **munkaasztalok**, különböző (Durcon epoxigyanta, műszaki kerámia, TrespaTopLab és laminált) munkalapokkal, igény szerinti víz és gáz szerelvényekkel
- **mosogató asztalok**, egy vagy két medencés, polipropilén, illetve Durcon epoxigyanta mosogatóval
- **alsó szekrények**, álló és ülő munkahelyekhez
- **felső szekrények, polcok**, falra vagy fémvázra szerelhető kialakítással
- **szekrények**, tömör vagy üvegezett ajtóval

Külön kategóriát képviselnek a DeLabo által készített

- **vegyifülkék**, amelyek normál kialakításúak és ATEX besorolásúak lehetnek, továbbá megrendelhetők TÜV tanúsítvánnyal is

A standard típus- és méretválaszték mellett - a tisztatéri bútorokhoz hasonlóan - partnereink kérésére egyedi igények és méretek megvalósítását is vállaljuk.

Komplett megoldások...

- tervezés és kivitelezés
- minőség, elérhető áron
- több mint 20 év tapasztalat
- igény szerinti kialakítások
- egyedi elképzelések megvalósítása



Keresse munkatársainkat...

- megbeszéljük
- felmérjük
- megtervezzük
- elkészítjük
- beépítjük

